



$X \triangleq ACT$



*Manuel d'utilisation*

## *Les Équipements adaptés Physipro inc.*

**Physipro inc.** est fière de vous compter parmi ses clients. L'entreprise tient particulièrement à vous remercier de la confiance que vous avez mise en elle en vous procurant l'un de ses produits.

Depuis ses débuts en 1988, **Physipro inc.** a choisi d'améliorer la qualité de vie de ses clients, d'être sensible à leurs besoins particuliers et surtout, de demeurer à l'écoute des gens. L'entreprise québécoise a pour objectif de produire des aides techniques personnalisées qui répondent efficacement aux besoins réels des personnes handicapées physiquement ou en perte d'autonomie.

De par ses hautes exigences, **Physipro inc.** s'est spécialisée dans la conception et dans la fabrication d'aides techniques dans le domaine de la réadaptation. Grâce à sa vaste expérience et à son personnel paramédical et technique hautement qualifié, **Physipro inc.** peut désormais se profiler comme étant le spécialiste dans son domaine. Au fil des ans, **Physipro inc.** a développé une expertise qui est maintenant reconnue par un grand nombre de professionnels de la santé et ce, à travers le monde. Pour toutes ces raisons, **Physipro inc.** offre une garantie des plus complètes.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser la **base  $X \cong ACT$** , un produit **Physipro inc.**, en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, **Physipro inc.** vous demande de vous adresser systématiquement à un professionnel reconnu.

**Physipro inc.** vous indique précisément les vérifications à faire sur une base régulière. Ainsi, vous optimiserez la performance de votre **base  $X \cong ACT$**  tout en prolongeant la durée de vie de cette dernière.

**Physipro inc.** se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans leur utilisation ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

**Pour Physipro inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.**

## Table des matières

<b>1. Composantes principales de la base <math>\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}</math></b>	<b>3</b>
<b>2. Spécifications</b>	<b>4</b>
<b>3. Recommandations</b>	<b>5</b>
3.1 VÉRIFICATIONS D'USAGE .....	5
3.2 RÈGLES DE SÉCURITÉ .....	5
3.3 NETTOYAGE, DÉSINFECTION DE BASE ROULANTE .....	6
3.3.1 Peinture : .....	6
3.3.2 Recommandations : .....	6
3.3.3 Rangement : .....	6
PROFONDEUR .....	7
3.4 MODIFIER LA PROFONDEUR D'ASSISE.....	7
<b>4. Hauteur siège/sol</b>	<b>8</b>
4.1 COMBINER LES ROUES AVANT ET ARRIÈRE .....	8
4.2 INSTALLATION DU MÉCANISME DE JONCTION .....	9
<b>5. Roues arrière</b>	<b>10</b>
5.1 INSTALLER LES ROUES DE 12 PO (31 CM).....	10
5.2 INSTALLER LES ROUES DE 16 PO (40,6 CM).....	10
5.3 INSTALLER LES ROUES ARRIÈRE DE 20, 22 ET 24 PO (51, 56 ET 61 CM).....	11
5.3.1 Plaque de fixation .....	11
5.3.2 Dispositif de positionnement horizontal .....	12
5.3.3 Installation des grandes roues .....	14
<b>6. Roues avant</b>	<b>15</b>
6.1 INSTALLER LES ROUES AVANT.....	15
6.2 INSTALLER LA FOURCHE .....	16
<b>7. Dossier</b>	<b>17</b>
7.1 MODIFIER L'ANGLE D'OUVERTURE .....	17
7.2 DOSSIER INCLINABLE AVEC CYLINDRE AU GAZ (OPTIONNEL).....	17
7.3 MODIFICATION DE LA HAUTEUR DU DOSSIER .....	18
<b>8. Bascule</b>	<b>19</b>
8.1 METTRE EN BASCULE POSITIVE .....	19
8.2 METTRE EN BASCULE NÉGATIVE .....	20
<b>9. Appuis-bras</b>	<b>21</b>
9.1 RETIRER .....	21
9.2 ESCAMOTER .....	21
9.3 RÉGLER EN HAUTEUR .....	21
<b>10. Appuis-pied</b>	<b>22</b>
10.1 ESCAMOTER LATÉRALEMENT ET RETIRER LES APPUIS-PIEDS .....	22
10.2 AJUSTER LA LONGUEUR .....	22
10.3 RÉGLER EN ANGLE ET/OU EN PROFONDEUR LES PALETTES .....	23
10.4 RABATTRE ET AJUSTER VERTICALEMENT LES PALETTES .....	24
10.4.1 Rabattre.....	24
10.4.2 Ajuster verticalement .....	24
<b>11. Freins</b>	<b>25</b>
11.1 INSTALLER LE SYSTÈME DE FREINAGE.....	25
11.2 RÉGLER LES FREINS.....	25
11.3 APPLIQUER LES FREINS .....	25
<b>12. Anti-basculants</b>	<b>26</b>
12.1 INSTALLER LES ANTI-BASCULANTS .....	26
12.2 AJUSTER LES ANTI-BASCULANTS.....	27
<b>13. Transport</b>	<b>28</b>
13.1 RABATTRE LE DOSSIER.....	28
13.2 REPÉRER LES ANNEAUX D'ANCRAGE.....	28
<b>14. Accessoires</b>	<b>29</b>
14.1 INSTALLER L'EXTENSION DE POIGNÉES DE POUSSÉE*.....	29
<b>15. Guide d'entretien</b>	<b>30</b>
<b>16. Garantie</b>	<b>31</b>

## 1. COMPOSANTES PRINCIPALES DE LA BASE $X \cong ACT$

Figure 1 - Les composantes principales sont fournies sur le modèle standard de la base. Plusieurs options et accessoires sont également offerts. Pour de plus de détails, vous êtes invités à nous contacter ou à consulter le bon de commande.

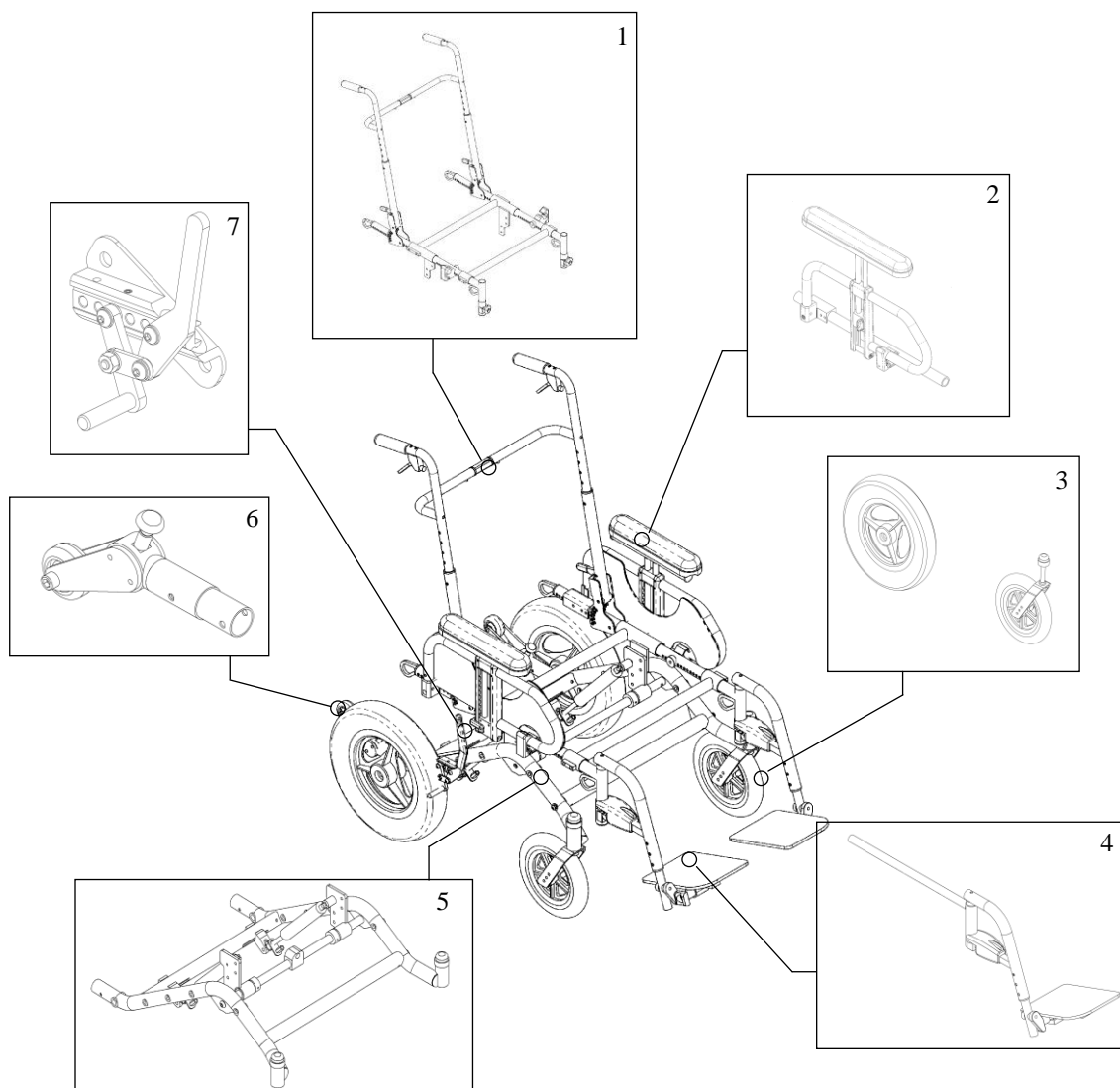


Figure 1 - Constituantes principales de la base

1. Siège;
2. Appui-bras;
3. Roues avant et arrière;
4. Appui-pied;
5. Châssis;
6. Anti-basculant;
7. Frein.

## 2. SPÉCIFICATIONS

Tableau 1.a - Tableau des spécifications du modèle de base

SIÈGE	
Largeur d'assise	15 à 20 po (38 à 51 cm)
Profondeur d'assise	16 à 22 po (41 à 56 cm) (voir tableau ci-bas pour les ajustements de profondeur)
Hauteur siège/sol	14 à 20 po (36 à 51 cm)
DOSSIER	
Hauteur	18 à 24 po (46 à 61 cm)
Inclinaison	85 à 135°
Rabattable	
APPUIS-BRAS	
Type « T », amovibles, escamotables	
Hauteur	8 à 14 po (20 à 36 cm) ou 12 à 16 po (30 à 41 cm)
Garniture de confort	Longue ou courte
APPUIS-PIEDS	
Amovibles, pivotants et réglables	60°, 70°, 75°, 90°.
Longueur	12 à 18 po (30 à 46 cm)
Palettes rabattables et réglables	
ROUES ET CHÂSSIS	
Roues arrière en plastique moulé, dur et semi dur	Ø 12 po et 16 po (Ø 31 cm et 41 cm)
Roues avant à pneus durs et semi dur	Ø 6 - 8 po (Ø 15 - 20 cm)
Cerceaux de conduite lisses	Ø 20 - 22 - 24 po (Ø 51 - 56 - 61 cm)
Freins à blocage par poussée	
Anti-basculant à roulette	
Ancrages pour transport adapté	
Fourches standard	
Essieux arrière fileté	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Bascule	-5 à 35° *
Poids	40 lb (18,14 kg) **
Largeur hors-tout	$l+8 \frac{1}{4}$ à $l+11$ po ( $l+21$ à $l+28$ cm) ***
Profondeur hors-tout (figure 2)	31 po max. (79 cm max.)
Capacité	250 lb (114 kg)

Les Équipements Adaptés Physipro inc. offre toute une panoplie d'accessoires et d'options permettant de personnaliser chaque base de positionnement en fonction des besoins particuliers de l'utilisateur. Pour de plus amples détails, vous êtes invités à nous contacter ou à consulter le bon de commande.

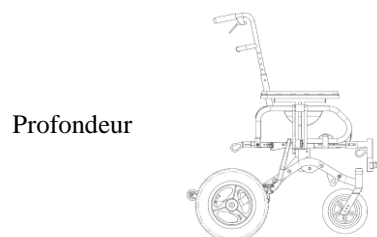


Figure 2 - Représentation de la profondeur

Tableau 1.b - Ajustements de profondeur d'assise

Profondeur commandée	Possibilités de profondeur d'assise
16 po (41 cm)	17 po (43 cm) et 18 po (46 cm)
17 po (43 cm)	16 po (41 cm) à 19 po (48 cm)
18 po (46 cm)	16 po (41 cm) à 20 po (51 cm)
19 po (48 cm)	16 po (41 cm) à 21 (53 cm)
20 po (51 cm)	16 po (41 cm) à 22 po (56 cm)
21 po (53 cm)	16 po (41 cm) à 22 po (56 cm)
22 po (56 cm)	16 po (41 cm) à 22 po (56 cm)

\* Peut varier selon les configurations;

\*\* N'inclus pas les appuis-pieds ni les appuis-bras;

\*\*\*  $l$  = largeur d'assise.

### 3. RECOMMANDATIONS



Ne pas utiliser cet équipement sans avoir bien lu et compris le présent manuel d'utilisation dans sa totalité. Celui-ci renferme des informations indispensables qui permettent d'assurer la sécurité de l'utilisateur et des individus mis en contact avec la base.

#### 3.1 Vérifications d'usage

Lors de la réception d'un fauteuil ainsi qu'au moment de la livraison, les vérifications suivantes devraient être réalisées :

- ✓ S'assurer que le **siège** est solidement fixé au châssis et qu'il est stable pour l'utilisateur;
- ✓ S'assurer que les **roues arrière et avant** sont solidement fixées et qu'aucun objet n'interfère avec leur bon fonctionnement;
- ✓ Vérifier l'efficacité des **cylindres de bascule**;
- ✓ Vérifier le bon fonctionnement et la solidité des **anti-bascules**;
- ✓ S'assurer de l'efficacité des **freins** d'immobilisation;
- ✓ Vérifier la pression adéquate des **pneus**;
- ✓ S'assurer de la solidité des **appuis-bras** lorsque ceux-ci sont verrouillés;
- ✓ Vérifier que les **appuis-pieds** soient bien placés et fixés solidement;
- ✓ S'assurer de la solidité du **dossier**;
- ✓ S'assurer qu'aucun **objet lourd** ne soit fixé au dossier.

#### 3.2 Règles de sécurité

De nombreuses règles doivent être appliquées pour assurer la sécurité de l'utilisateur et des individus mis en contact avec la base. Notez bien que la liste suivante **n'est pas** exhaustive. Il en va de la **responsabilité** de l'utilisateur et des personnes mises en contact avec la base de demeurer prudents dans les actions entreprises :

- ✓ Ne jamais circuler sans une pression adéquate des pneus;
- ✓ Ne pas tenter d'atteindre un objet si vous devez vous pencher vers l'avant ou l'arrière, ni de prendre l'objet en se penchant d'un côté ou de l'autre de la chaise;
- ✓ Ne pas tenter d'aborder un obstacle dont la hauteur pourrait mettre en péril la stabilité de la base;
- ✓ Ne jamais transporter de passager;
- ✓ Ne pas fixer d'objets au dossier, autres que ceux fournis avec la base;
- ✓ Ne pas aborder une pente dont l'inclinaison risque de mettre en péril la stabilité de la base;
- ✓ Ne jamais positionner la base de façon transversale dans une pente, car elle risquerait de basculer sur le côté;
- ✓ Ne pas tenter de basculer la chaise sans assistance;
- ✓ Ne pas s'engager sur les voies à circulation dense;
- ✓ Ne jamais soulever la base par ses parties escamotables ou amovibles. Utilisez plutôt les éléments rigides du châssis;
- ✓ Ne jamais utiliser les palettes d'appuis-pieds pour se soulever ou effectuer des transferts;
- ✓ Utiliser les points d'ancrages appropriés lors de l'emploi des transports adaptés.

### **3.3 Nettoyage, désinfection de Base roulante**

#### **3.3.1 Peinture :**

- Nettoyez la peinture avec un savon doux ou un détergent neutre dilué dans l'eau (2 once/8L d'eau) au moins une fois par mois.
- Protégez la peinture par une couche de cire automobile non-abrasive tous les (3) trois mois.

#### **3.3.2 Recommandations :**

- Éliminer toutes souillures (alimentaires et/ou biologiques) immédiatement sans attendre le nettoyage hebdomadaire.
- Ne pas doucher la base roulante, inutile de le laver à grande eau (le tubage et les pièces de la base ne sont pas étanches et peuvent rouiller et se corroder à l'intérieur.) si c'est le cas, séchez la base dès que possible.
- Vous pouvez effectuer le nettoyage à la vapeur en utilisant les accessoires nécessaires, ne pas oublier de bien sécher la base.
- Si une personne malade est infectée : Désinfectez au quotidien; l'assise, les accoudoirs, le dossier et toutes autre surface à l'aide d'un désinfectant en pulvérisant la surface, ne pas rincer, ni essuyer, laissez sécher.

#### **3.3.3 Rangement :**

- La base doit être rangée dans un endroit propre et sec.
- Si la base a été rangée pendant plus de (3) trois mois, faites vérifier par un fournisseur agréé avant l'utilisation.



## Profondeur

### 3.4 Modifier la profondeur d'assise

La profondeur d'assise de la **base**  $X \cong \mathcal{ACT}$  peut être modifiée par le déplacement des cannes de dossier (longerons  $I^1$  ou  $I^2$ <sup>1</sup>). Les étapes sont les suivantes :

- Avec une « clé hexagonale de 4 mm », ainsi qu'une « clé à fourche de 10 mm », desserrer les vis **A**, **B**, **C** et **D**. Répéter pour chaque côté de la base;
- Retirer les vis **E** et **F** pour chaque côté de la base;
- Repositionner le dossier de façon à avoir la profondeur désirée. Resserrer les vis **E** et **F** fermement;
- Recentrer l'assise sur le mécanisme de jonction et resserrer les vis **A**, **B**, **C** et **D** fermement.

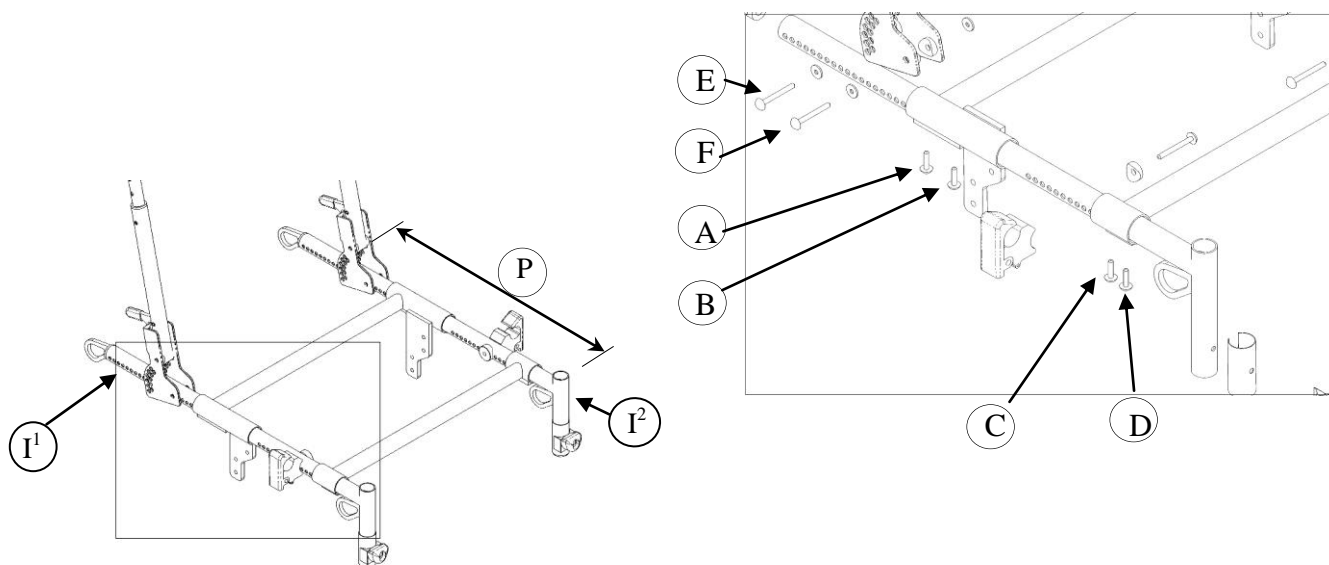


Figure 3 - Ajustement de la profondeur d'assise



**Une modification de la profondeur qui requiert le déplacement du longeron  $I_1$  vers l'arrière implique une baisse de stabilité de la base. Cette opération doit être réalisée avec prudence et nécessite une vérification systématique de la stabilité de la base.**

<sup>1</sup> Une **réduction** de la profondeur par le déplacement du longeron  $I_2$  nécessite, dans la plupart des cas, la coupe du longeron à la longueur désirée.

Une **augmentation** de la profondeur de plus de 1,5 po (4 cm) par le déplacement du longeron  $I_2$  nécessite, dans bien des cas, l'acquisition d'une pièce de croissance qui permet de combler le vide créé. Pour de plus amples détails, vous êtes invités à communiquer avec nous.



#### 4. HAUTEUR SIÈGE/SOL

La hauteur siège/sol  $H_s$  de la base  $X \cong ACT$  (Figure 4), varie en fonction des deux aspects suivants :

- La combinaison des diamètres des roues avant et arrière;
- Le choix de positionnement du mécanisme de jonction.

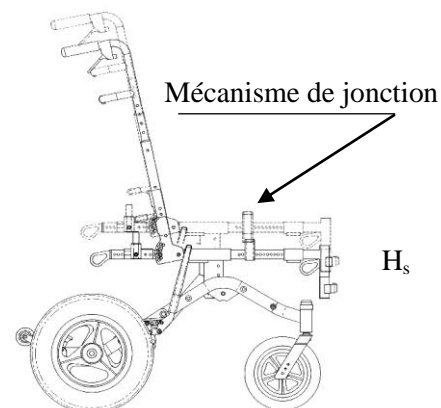


Figure 4 - Hauteur Siège/Sol



**Toute modification apportée à la base  $X \cong ACT$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.**

##### 4.1 Combiner les roues avant et arrière

La combinaison des diamètres des roues avant et arrière détermine une **hauteur siège/sol nominale**, tel que présenté au tableau 2. Si un changement de roues s'impose, se référer aux sections 5 et 6 pour l'installation.

Tableau 2 - Hauteur nominale et ajustements en hauteur

GRANDEUR DE ROUES POUR HAUTEUR SIÈGE-SOL	Choix de hauteur	
Roues avant 15,2 cm (6 po) avec roues arrière de 50,8 cm (20 po)	35,6 cm (14 po), 38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po).	Hauteur :
Roues avant 15,2 cm (6 po) avec roues arrière de 55,9 cm (22 po)	38,1 cm (15 po), 40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po).	Hauteur :
Roues avant 20,3 cm (8 po) avec roues arrière de 30,5 cm (12 po)	40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po).	Hauteur :
Roues avant 20,3 cm (8 po) avec roues arrière de 40,6 cm (16 po)	40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po).	Hauteur :
Roues avant 20,3 cm (8 po) avec roues arrière de 50,8 cm (20 po)	40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po).	Hauteur :
Roues avant 20,3 cm (8 po) avec roues arrière de 55,9 cm (22 po)	40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,5 cm (19 po), 50,8 cm (20 po).	Hauteur :
Roues avant 20,3 cm (8 po) avec roues arrière de 61,0 cm (24 po)	40,6 cm (16 po), 43,2 cm (17 po), 45,7 cm (18 po), 48,5 cm (19 po), 50,8 cm (20 po).	Hauteur :

\* Voir section 4.2

## 4.2 Installation du mécanisme de jonction

Le mécanisme de jonction (Figure 5) permet l'augmentation de la hauteur siège/sol de 2 po (5 cm) par rapport à la hauteur nominale et ce, par incrément de 1 po (2,5 cm), tel que présenté au tableau 2. Pour modifier la hauteur, les étapes suivantes doivent être réalisées :

1. Maintenir les écrous  $A_1$  et  $A_2$  à l'aide d'une « clé à fourche 10 mm » (figure 5);
2. Libérer les vis  $B_1$  et  $B_2$  en utilisant une « clé hexagonale 4 mm ». **Il est essentiel de bien retenir l'interface pendant l'opération;**
3. Réaliser les étapes 1 et 2 de part et d'autre du siège;
4. Positionner le mécanisme de jonction selon les indications du Tableau 3 et de la figure 6. **Prendre soin de serrer fermement les écrous.**

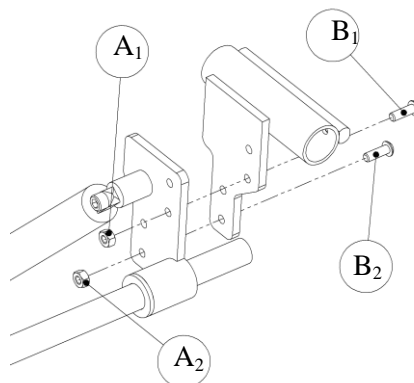


Figure 5 - Système d'ajustement en hauteur du siège

Tableau 3 - Position des vis du mécanisme de jonction

Hauteur désirée	Position des écrous « A » et vis « B »	
	$A_1$ et $B_1$	$A_2$ et $B_2$
Hauteur nominale	X2 et Y1	X4 et Y3
Hauteur nominale + 1 po (2,5 cm)	X1 et Y1	X3 et Y3
Hauteur nominale + 2 po (5 cm)	X1 et Y2	X3 et Y4

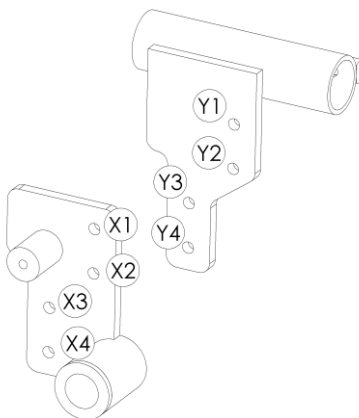


Figure 6 - Position des trous d'ajustements

## 5. ROUES ARRIÈRE

### 5.1 Installer les roues de 12 po (31 cm)

La base  $X \cong ACT$  peut être équipée de roues arrière de 12 po (31 cm). Les étapes permettant de procéder à l'installation de ces roues sont les suivantes :

1. Vérifier l'emplacement du frein. Il doit être installé avant la roue. Consulter la section 11.1;
2. Insérer l'essieu **A** à l'intérieur du moyeu de la roue (Figure 7);
3. Glisser l'entretoise **B** sur l'essieu **A**;
4. Insérer l'assemblage à l'intérieur de la bague de roulement prévue sur le châssis et fixer fermement l'écrou **C** à l'aide d'une « clé à douille  $\frac{3}{4}$  » et d'une « clé à fourche  $\frac{3}{4}$  » pour **A** et **C**.

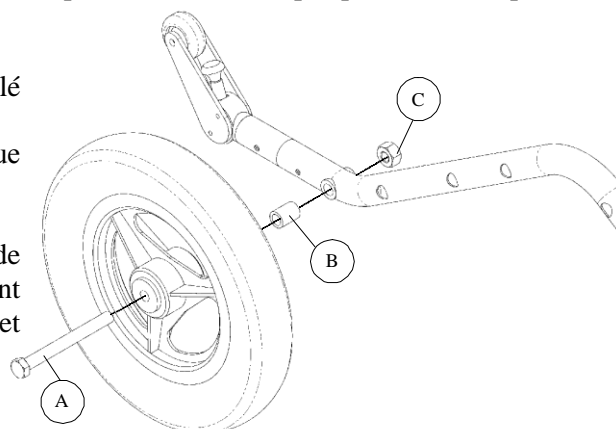


Figure 7 - Installation de la roue arrière de 12 po (31 cm)



**L'installation des roues de 12 po (31 cm) nécessite un réajustement des roues avant, des freins et des anti-basculants. Il est essentiel de consulter les sections 6, 11 et 12 qui traitent de ces sujets.**

### 5.2 Installer les roues de 16 po (40,6 cm)

La base  $X \cong ACT$  peut être équipée de roues arrière de 16 po (40,6 cm). Les étapes permettant de procéder à l'installation de ces roues sont les suivantes :

1. Vérifier l'emplacement du frein. Il doit être installé avant la roue. Consulter la section 11.1;
2. Placer le bloc d'élévation **A** sur le châssis. Le fixer à l'aide d'une vis **B<sup>1</sup>** et des écrous **C**.
3. Insérer l'essieu **B<sup>2</sup>** à l'intérieur du moyeu de la roue (Figure 8);
4. Glisser l'entretoise **D** sur l'essieu **B<sup>2</sup>** et visser l'ensemble à l'aide des écrous **E**.
5. Insérer l'assemblage à l'intérieur du bloc d'élévation. Le fixer sur le châssis et fixer les deux écrous **C** à l'aide d'une « clé à douille  $\frac{3}{4}$  » et d'une « clé à fourche  $\frac{3}{4}$  ».

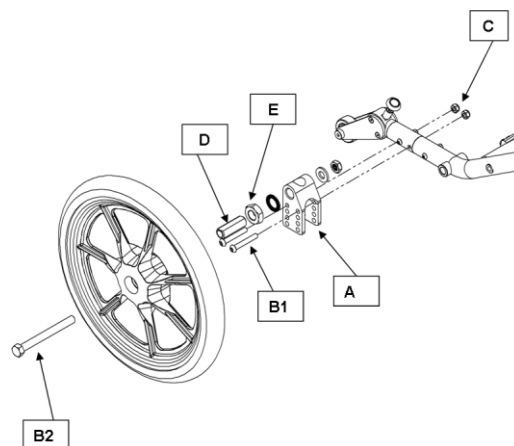


Figure 8 - Installation de la roue arrière de 16 po (40,6 cm)



**L'installation des roues de 16 po (40.6 cm) nécessite un réajustement des roues avant, des freins et des anti-basculants. Il est essentiel de consulter les sections 6, 11 et 12 qui traitent de ces sujets.**

### 5.3 Installer les roues arrière de 20, 22 et 24 po (51, 56 et 61 cm)

#### 5.3.1 Plaque de fixation

Les roues arrière de 20, 22 et 24 po (51, 56 et 61 cm) sont fixées à la base par l'intermédiaire de la plaque de fixation montrée à la figure 9. Celle-ci est assemblée au châssis en procédant de la manière suivante :

1. Déterminer la position de la plaque de fixation en se référant au tableau 4 et à la figure 10;
2. Insérer les vis **D** dans les trous correspondants de la plaque de fixation (figure 9);
3. Glisser les entretoises **E** sur les vis **D** (si applicable);
4. Serrer fermement les vis **D** à l'aide d'une « clé hexagonale 6 mm » dans les trous correspondants à la position prévue.

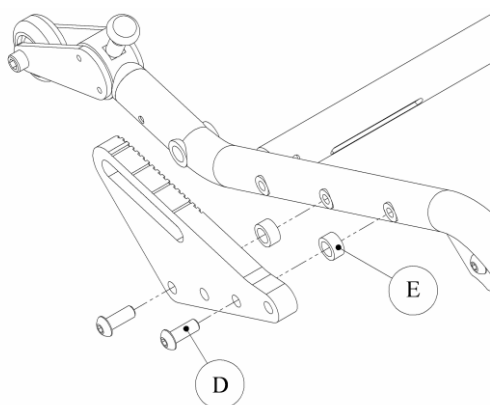


Figure 9 - Installation de la plaque de fixation

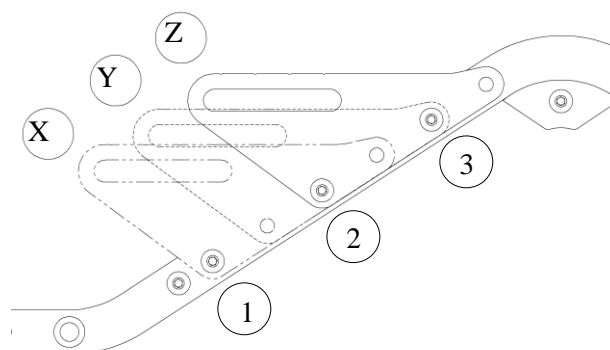


Figure 10 - Position de la plaque de fixation

Tableau 4 - Position de la plaque de fixation des grandes roues

Diamètre roue arrière	Diamètre roue avant	Position de la plaque de fixation	Position des vis
20 po (51 cm)	6 po (15 cm)	Z	2 et 3
	8 po (20 cm)	X	1 et 2
22 po (56 cm)	6 po (15 cm)	Z	2 et 3
	8 po (20 cm)	Y	2 et 3
24 po (61 cm)	8 po (20 cm)	Z	2 et 3

### 5.3.2 Dispositif de positionnement horizontal

L'emplacement horizontal des grandes roues a une influence considérable sur la stabilité de la base. En effet, plus on positionne les **grandes roues vers l'avant**, plus la stabilité en **bascule diminue**.

Le **positionneur** de grande roue (figure 11), permet de contrôler ce paramètre. Il maintient l'axe des roues de 20, 22 et 24 po (51, 56 et 61 cm) en place sur la plaque de fixation. Quatre emplacements horizontaux de base (**0, 1, 2 et 3**), identifiés par des rainures, servent de point de repère sur la plaque de fixation. Plusieurs emplacements intermédiaires sont également offerts. **Plus la position de la grande roue se rapproche de 0, plus la stabilité de la base de positionnement diminue.**

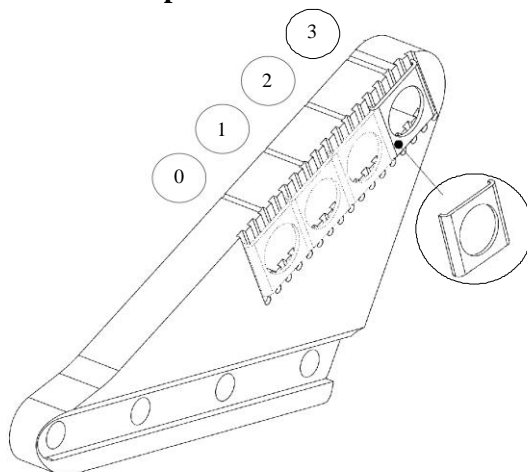


Figure 11 - Positionneur de grande roue



Toute modification apportée à la base  $X \cong ACT$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.

La procédure suivante permet de modifier l'emplacement du positionneur de grande roue :

1. Enlever le capuchon **L** sur la grande roue (figure 12);
2. Libérer le dispositif de positionnement en dévissant l'écrou **F** qui maintient la roue en place, à l'aide d'une « clé à fourche  $\frac{3}{4}$  », tout en maintenant l'essieu **K** avec une « clé à douille  $\frac{3}{4}$  »;
3. Dévisser légèrement l'écrou **G** à l'aide d'une « clé à fourche  $1 \frac{1}{8}$ " » pour libérer la rondelle **H** et le positionneur **I**;
4. Glisser le dispositif de positionnement dans la rainure de la plaque de fixation et installer le positionneur **I** à l'emplacement désiré;
5. Remettre la rondelle **H** en place et fixer solidement le dispositif de positionnement à l'aide de l'écrou **G**;
6. Remettre la roue en place et fixer solidement. Consulter la section 5.3.3.

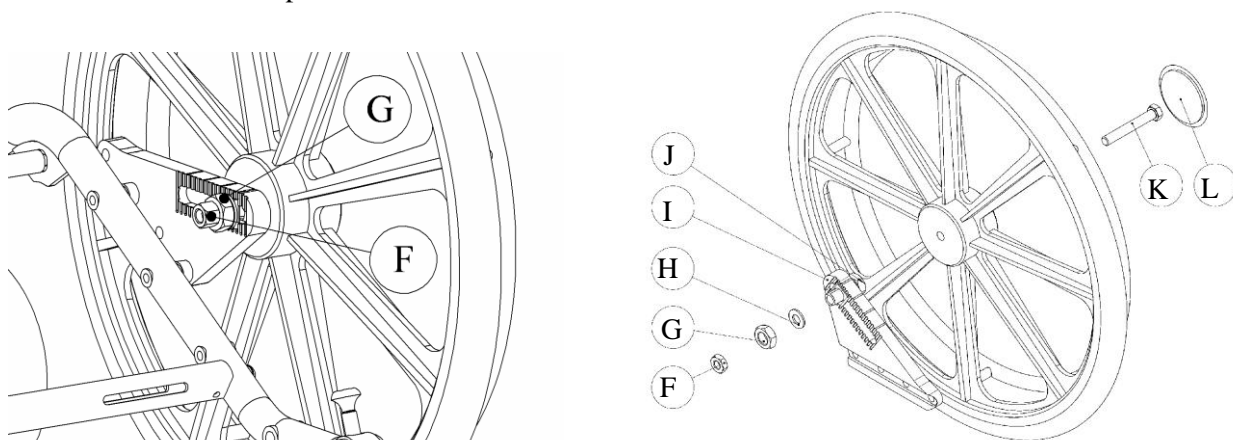


Figure 12 – Vues arrière du dispositif de positionnement

### 5.3.3 Installation des grandes roues

Les roues de 20, 22 et 24 po (51, 56 et 61 cm) peuvent être installées au châssis en procédant de la manière suivante :

1. Vérifier l'emplacement du frein. Celui-ci doit être installé avant la roue. Consulter la section 11.1;
2. S'assurer de l'exactitude de la position de la plaque de fixation des grandes roues. Consulter la section 5.3.1;
3. Installer correctement le positionneur de grande roue. Consulter la section 5.3.2;
4. Insérer l'essieu *N* dans le moyeu de grande roue (figure 13);
5. Glisser l'essieu *N* à l'intérieur du dispositif de positionnement *O*;
6. Serrer fermement l'écrou *P* avec une « clé à fourche ¾ » tout en maintenant l'essieu *N* avec une « clé à douille ¾ »;
7. Installer le capuchon *M* sur la grande roue.

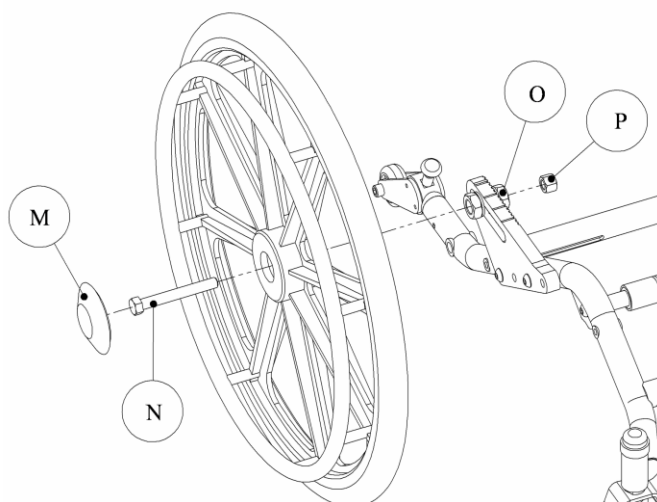


Figure 13 - Installation des roues de 20, 22 et 24 po (51, 56 et 61 cm)



**L'installation des roues de 20, 22 et 24 po (51, 56 et 61 cm) nécessite un réajustement des roues avant, des freins et des anti-basculants. Il est essentiel de consulter les sections 6, 11 et 12 qui traitent de ces sujets.**



**Vérifier systématiquement la stabilité de la base. Un changement d'emplacement de l'assise ou du dispositif de positionnement de grande roue peut s'avérer nécessaire. Consulter les sections 3.4 et 5.3.3.**



**Toute modification apportée à la base  $X \cong ACT$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.**



## 6. ROUES AVANT

### 6.1 Installer les roues avant

La base  $\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}$  peut accueillir des roues avant de 5, 6 ou 8 po (13, 15 ou 20 cm) de diamètre, d'une largeur de 1 ou 2 po (2,5 ou 5 cm)<sup>2</sup>. La procédure d'installation des roues avant est la suivante :

1. Déterminer la position de la roue avant sur la fourche selon les indications présentées au tableau 5 et à la figure 15;
2. Insérer la vis **A** à l'intérieur de la première paroi de la fourche (figure 14), selon la position précédemment déterminée;
3. Glisser une première entretoise **B** sur la vis **A**;
4. Insérer la roue dans la fourche et insérer la vis **A** dans l'axe de la roue;
5. Glisser la deuxième entretoise **B** sur la vis **A**;
6. Fixer en serrant fermement l'écrou **C** sur la vis **A** à l'aide de deux « clés à fourche  $\frac{5}{8}$  ».

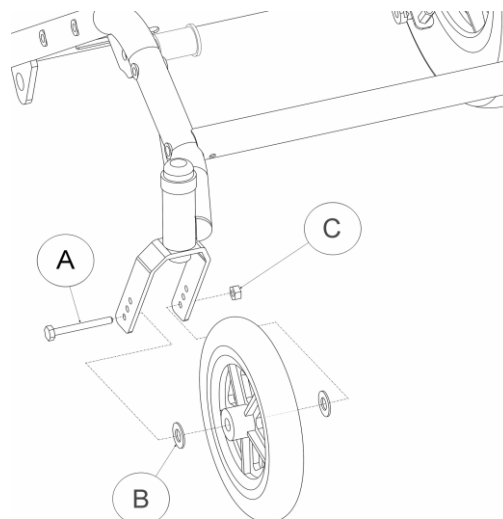


Figure 14 - Installation de la roue avant

Tableau 5 - Position de la roue avant sur la fourche\*

Diamètre roue arrière	Diamètre roue avant	Position de la roue sur la fourche
12 po (31 cm)	8 po (20 cm)	F
20 po (51 cm)	6 po (15 cm)	H
	8 po (20 cm)	F
22 po (56 cm)	6 po (15 cm)	G
	8 po (20 cm)	F
24 po (61 cm)	8 po (20 cm)	G

\* Il est important de respecter la position indiquée dans le tableau. Un mauvais ajustement pourrait occasionner des vibrations sur les roues avant et/ou fausser certaines spécifications attribuées à la base de positionnement.

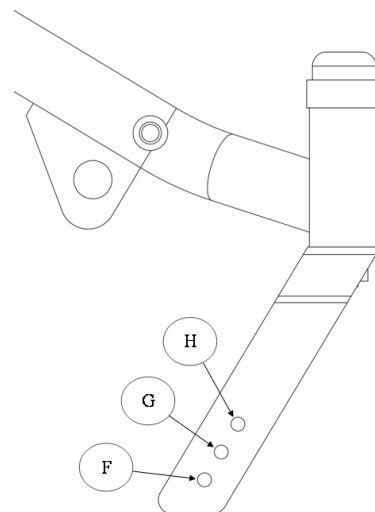


Figure 15 - Position de la roue avant

<sup>2</sup> Le changement d'une roue de largeur 1 po (2,5 cm) à une roue de largeur 2 po (5 cm), ou vice-versa, nécessite l'acquisition d'une fourche adaptée à chacun des cas. Pour de plus amples informations, vous êtes invités à communiquer avec nous ou à consulter le catalogue.

## 6.2 Installer la fourche

Les fourches peuvent être changées en utilisant la procédure qui suit :

1. Glisser le roulement **J** sur la tige filetée de la fourche (figure 16);
2. Insérer la tige dans le logement du châssis. S'assurer de bien positionner le roulement **J**;
3. Glisser le roulement **K** dans le logement prévu à cette fin ;
4. Fixer la fourche en serrant jusqu'au bout de sa course l'écrou **L** avec une « clé à fourche 3/4 »\*;
5. Poser le capuchon **M** sur le logement du châssis.

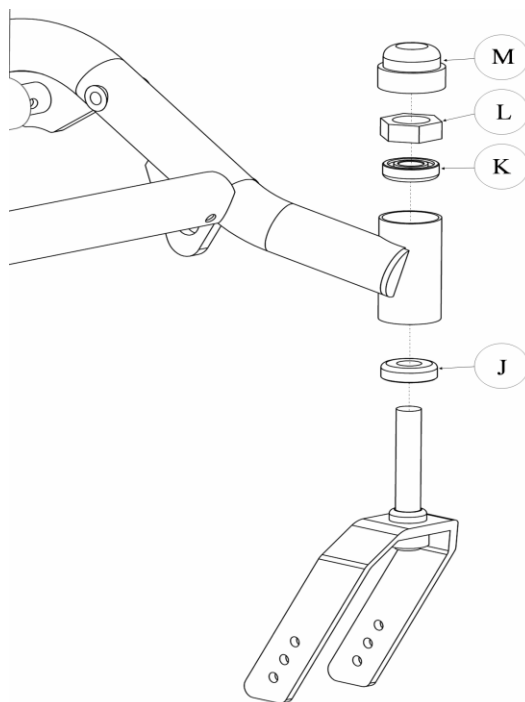


Figure 16 - Assemblage de la fourche



**\* S'assurer du serrement adéquat lors de l'installation des fourches. Vérifier la bonne rotation de celles-ci. Dans le cas contraire, desserrer légèrement l'écrou.**



**Toute modification apportée à la base  $\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.**

## 7. DOSSIER

### 7.1 Modifier l'angle d'ouverture

L'angle d'ouverture du dossier de la base  $X \cong \mathcal{ACT}$ , noté  $\alpha$  peut être ajusté selon les besoins.

Pour **ouvrir** l'angle de dossier :

1. Desserrer l'écrou arrière **B** selon les besoins à l'aide d'une «clé hexagonal 4mm» et d'une «clé à fourche 10 mm »;
2. Retirer la vis;
3. Basculer à l'angle désiré;
4. Remettre la vis, les espacements et l'écrou en place.

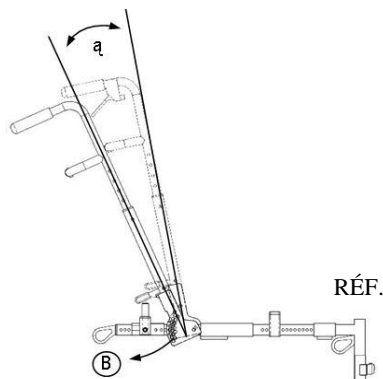


Figure 17 - Ajustement de l'angle de dossier

### 7.2 Dossier inclinable avec cylindre au gaz (optionnel)

L'inclinaison du dossier (figure 17a) se fait comme suit :

Ce dossier inclinable avec un cylindre au gaz permet de modifier l'angle  $\Theta$  du dossier rapidement à l'aide d'une seule poignée A qui déclenche le cylindre. Celui-ci nous permet de passer de  $90^\circ$  à  $145^\circ$ .

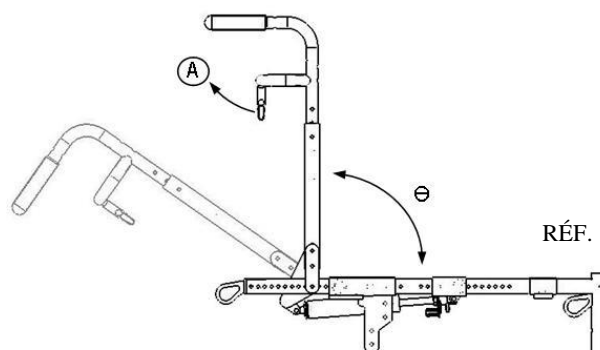


Figure 17a - Ajustement de l'inclinaison du dossier

### 7.3 Modification de la hauteur du dossier

La hauteur  $H_d$  du dossier (figure 18) s'ajuste comme suit :

1. Retirer la vis **C** avec une « clé hexagonale 4 mm » et une « clé à fourche 10 mm »;
2. Ajuster la hauteur  $H_d$  du dossier;
3. Remettre en place la vis **C** et serrer fermement.

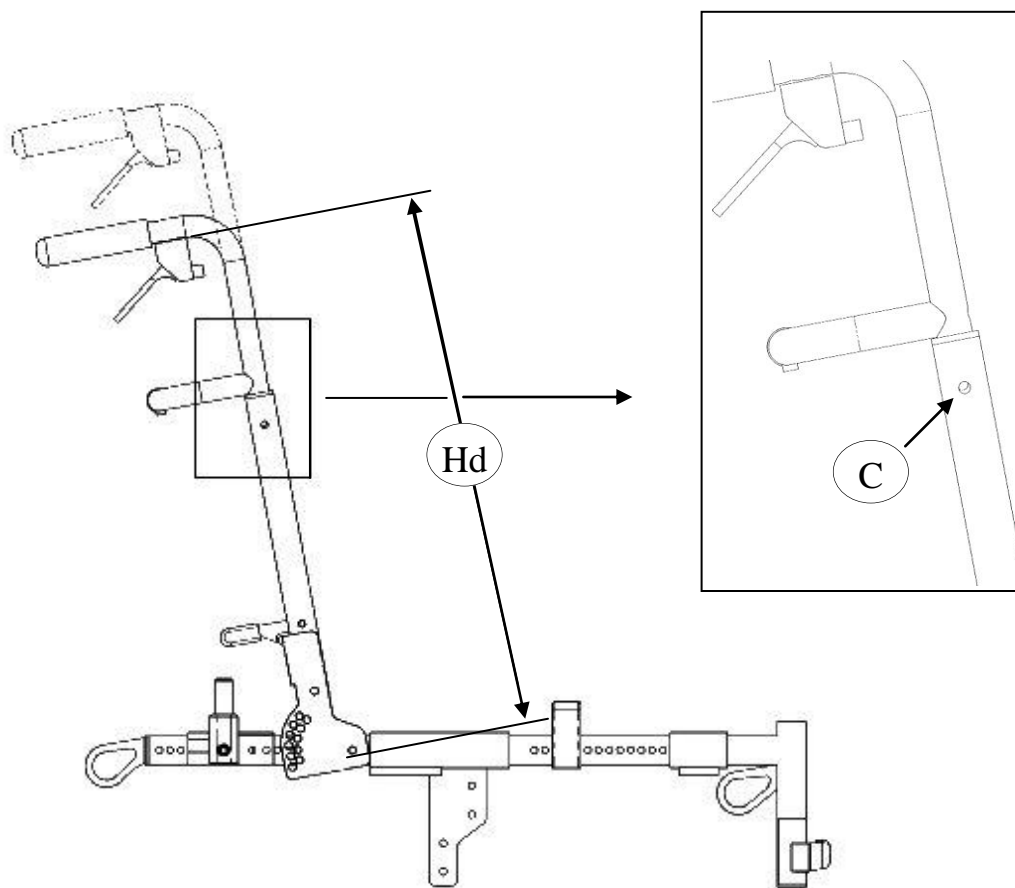


Figure 18 - Ajustement de la hauteur de dossier



**Toute modification apportée à la base  $X \cong ACT$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.**

## 8. BASCULE

### 8.1 Mettre en bascule positive

La base  $X \cong \mathcal{ACT}$  peut être basculée vers l'arrière, en bascule positive, en se référant à la méthode suivante :

1. Lors de la mise en bascule positive, actionner les freins d'immobilisation **B** (Figure 19). Consulter la section 11.3;
2. Vérifier la position des anti-basculants **C**. Consulter la section 12;
3. Actionner la bascule en pressant simultanément sur les 2 poignées **A**;
4. Relâcher les poignées à l'angle de bascule désiré. **L'angle  $\Theta$  de bascule peut varier suivant la hauteur siège/sol, la position de l'essieu des roues arrière, la position de l'interface, l'inclinaison de dossier et la largeur hors-tout;**
5. Au besoin, l'angle de bascule maximal positif peut être limité par un collet de serrage **D** installé sur la partie inférieure du cylindre.
6. L'angle de bascule en position redressée peut, quant-à-lui, être contrôlé par la position de la bague de retenue **E** et des fourchettes de retenue **F**.

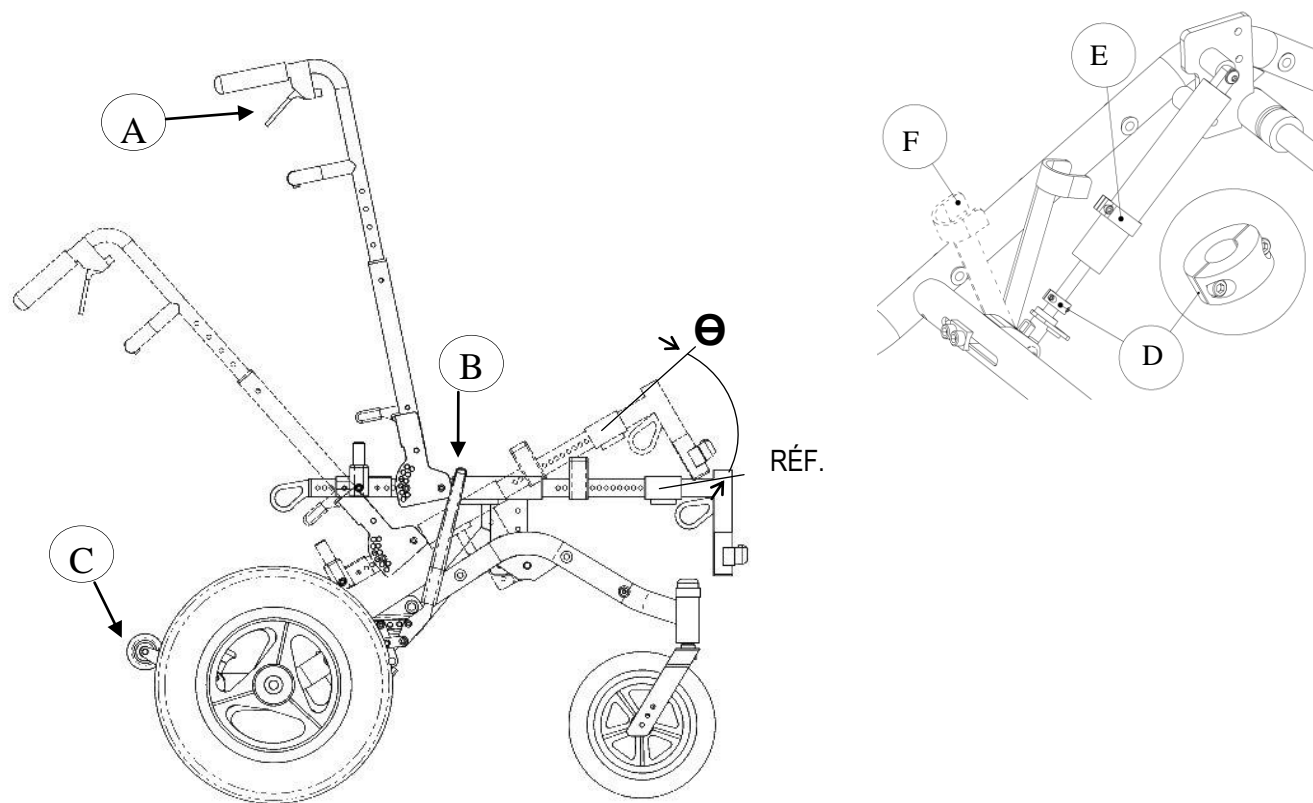


Figure 19 - Fonctionnement de la bascule positive

## 8.2 Mettre en bascule négative

Pour faciliter les transferts, la base  $\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}$  peut être basculée vers l'avant, en bascule négative, en se référant à la méthode suivante :

1. Lors de la mise en bascule négative, actionner les freins d'immobilisation **H** (Figure 20). Consulter la section 11.3. L'angle  $\Theta$  de bascule peut varier suivant la hauteur siège/sol, la position de l'essieu des roues arrière, la position de l'interface, l'inclinaison du dossier et la largeur hors-tout;
2. Amener la base en bascule positive avant de dégager les fourchettes de retenues **I** de la bague de retenue **J**;

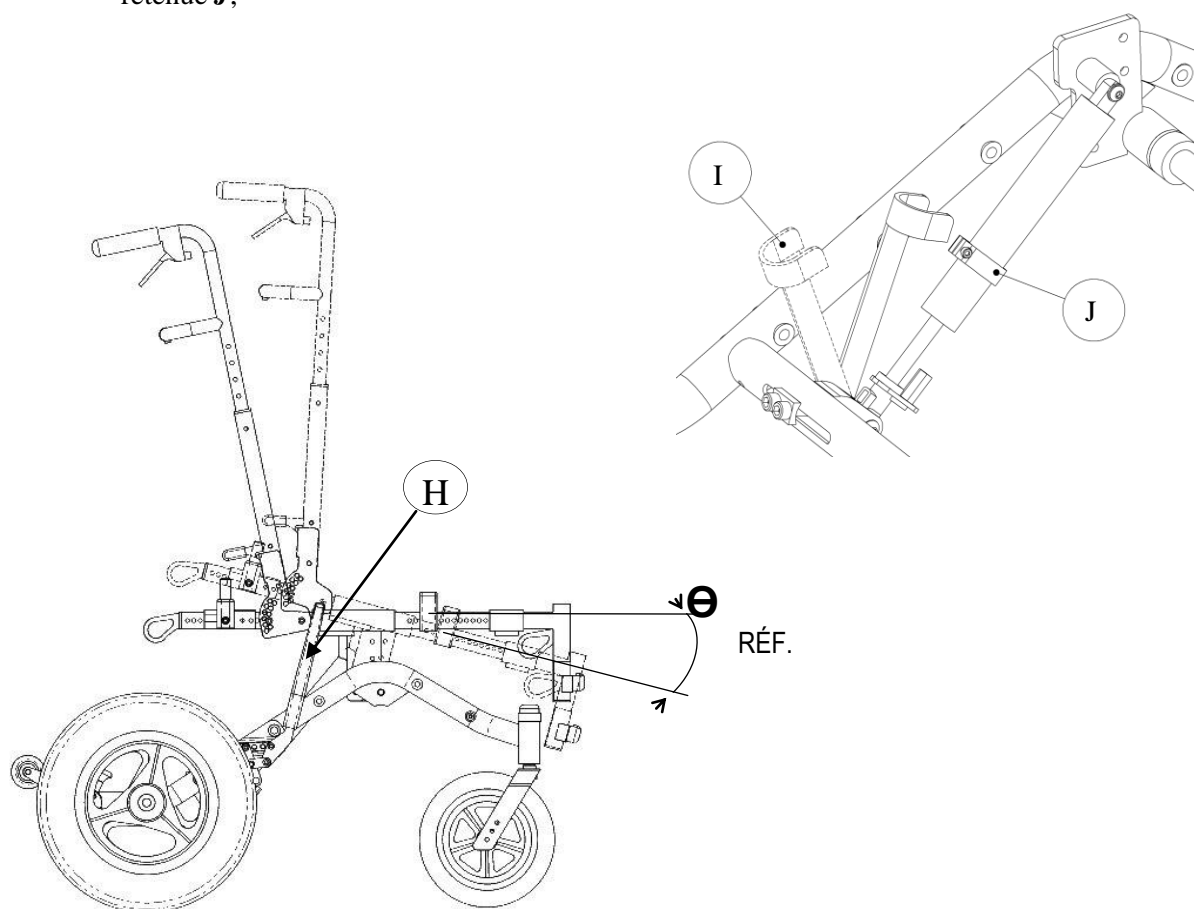


Figure 20 - Fonctionnement de la bascule négative



S'assurer de remettre en place les fourchettes de retenues de bascule **H** après le transfert du client et ce, afin que celui-ci ne se retrouve pas en bascule négative non désirée.

## 9. APPUIS-BRAS

La base  $X \cong ACT$  est équipée d'appuis-bras amovibles et escamotables pour faciliter les transferts latéraux.

### 9.1 Retirer

1. Appuyer sur le déclencheur **A** (Figure 221) et soulever l'appui-bras pour le retirer;

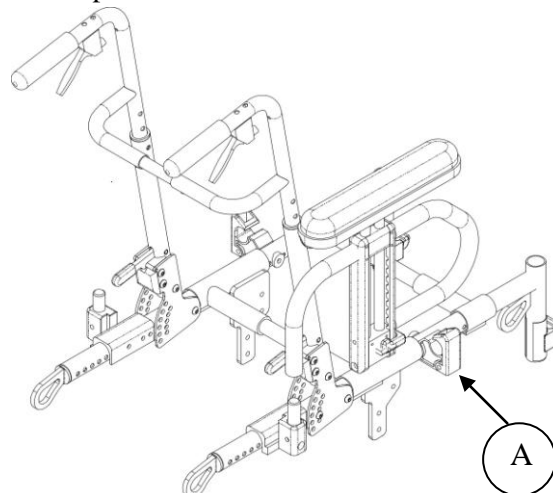


Figure 21 - Enlever un appui-bras

### 9.2 Escamoter

1. Appuyer sur le déclencheur **B** (Figure 22);
2. Basculer l'appui-bras vers l'arrière.

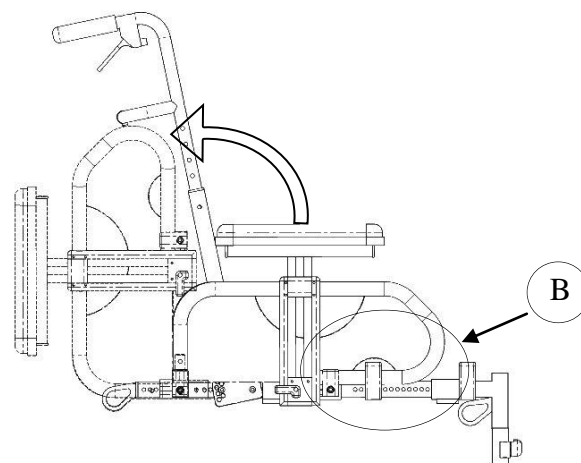
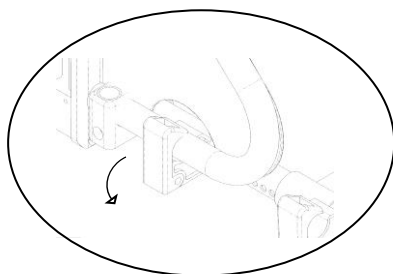


Figure 22 - Escamoter un appui-bras

### 9.3 Régler en hauteur

Pour régler la hauteur  $H_a$  des appuis-bras :

1. Pousser le bouton **A** vers l'avant (figure 23);
2. Faire monter ou descendre l'appui bras **B** (réglable au  $\frac{1}{2}$ " );
3. Relâcher le bouton **A** en s'assurant qu'il soit dans une coche d'ajustement.


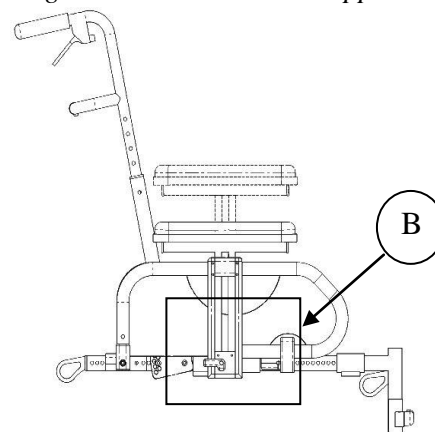


Figure 23 - Ajustement en hauteur

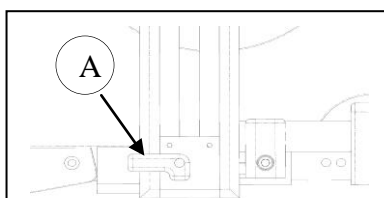

## 10. APPUIS-PIED

### 10.1 Escamoter latéralement et retirer les appuis-pieds

La méthode suivante permet d'escamoter et de retirer les appuis-pieds :

1. Appuyer sur le déclencheur à ressort **A** et le maintenir;
2. Faire pivoter l'appui-pied vers l'extérieur ou l'intérieur de la base ( figure 24);
3. Une fois escamoté, tirer l'appui-pied vers le haut pour le retirer (figure 25).

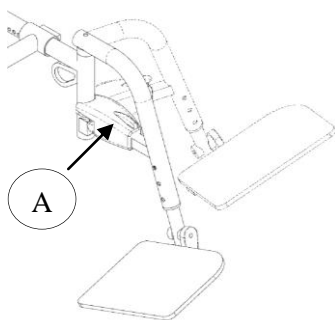


Figure 24 - Escamoter l'appui-pied

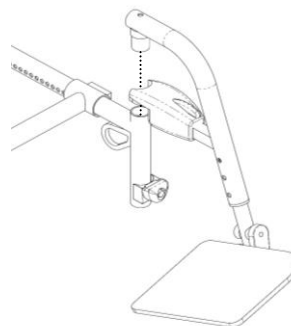


Figure 25 - Retirer l'appui-pied

### 10.2 Ajuster la longueur

Pour modifier la longueur des appuis-pieds, se référer à la méthode suivante :

1. Enlever les vis **B** en utilisant une « clé à fourche 10 mm » (figure 26);
2. Descendre ou monter l'appui-pied selon les besoins;
3. Replacer les entretoises **C** et les vis **B** et serrer fermement.

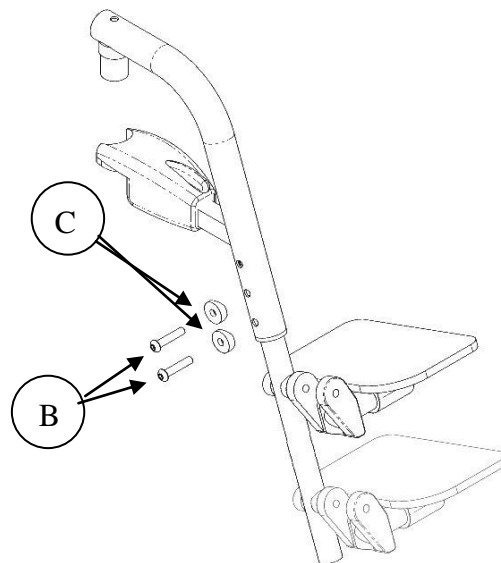


Figure 26 - Ajustement en longueur des appuis-pieds

### 10.3 Régler en angle et/ou en profondeur les palettes

Une méthode unique, expliquée ici, permet d'ajuster à la fois l'angle ou la profondeur des palettes des appuis-pieds :

1. À l'aide d'une « clé hexagonale 5mm », desserrer la vis **D** pour procéder à l'un ou l'autre des ajustements (figure 27);
2. Pour procéder à un réglage en **profondeur** faire coulisser la palette sur son rail (figure 28);
3. Pour ajuster l'**angle** faire pivoter la palette autour de l'axe de la rotule de l'appui-pied (figure 29);
4. Resserrer fermement la vis **D** après chaque réglage.

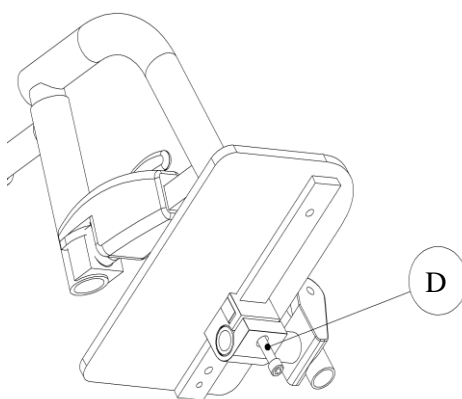


Figure 27 - Détail du bloc de réglage

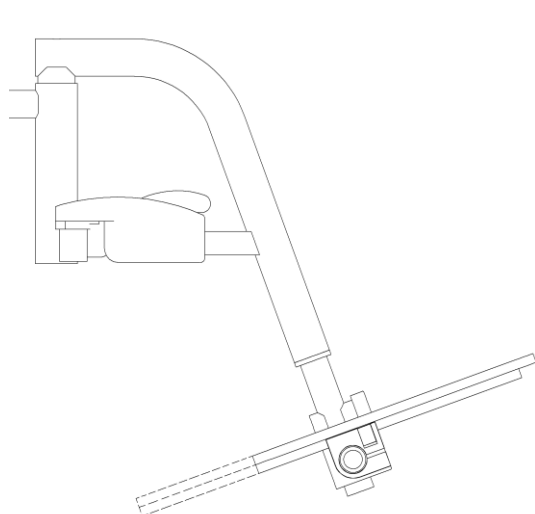


Figure 28 - Ajustement en profondeur

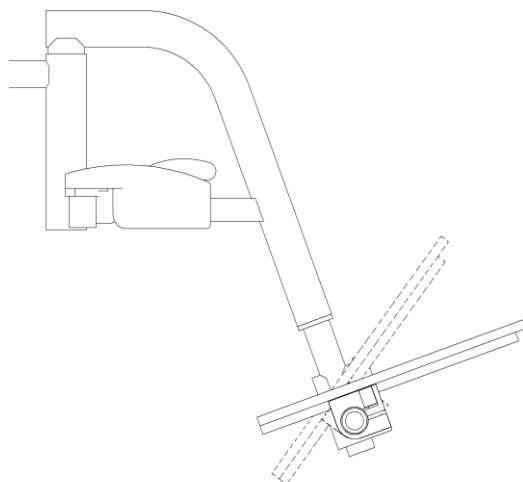


Figure 29 - Réglage de l'angle

## 10.4 Rabattre et ajuster verticalement les palettes

### 10.4.1 Rabattre

Pour rabattre la palette d'appui-pied, il suffit de la pousser vers le haut (figure 30).

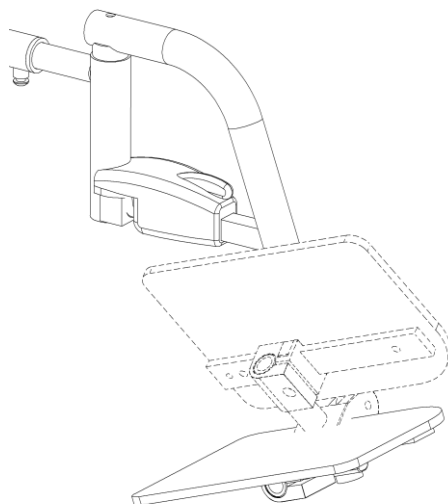


Figure 30 - Rabattre la palette d'appui-pied

### 10.4.2 Ajuster verticalement

Pour ajuster les palettes des appuis-pieds selon l'angle  $\beta$  (figure 31), il suffit de tourner la vis  $F$  sous la palette à l'aide d'une « clé hexagonale 1/4" », notée  $E$ . Notez bien que la clé doit être insérée du côté opposé au bloc d'ajustement. L'action de visser permet d'augmenter l'angle  $\beta$ , et dévisser permet de le diminuer.

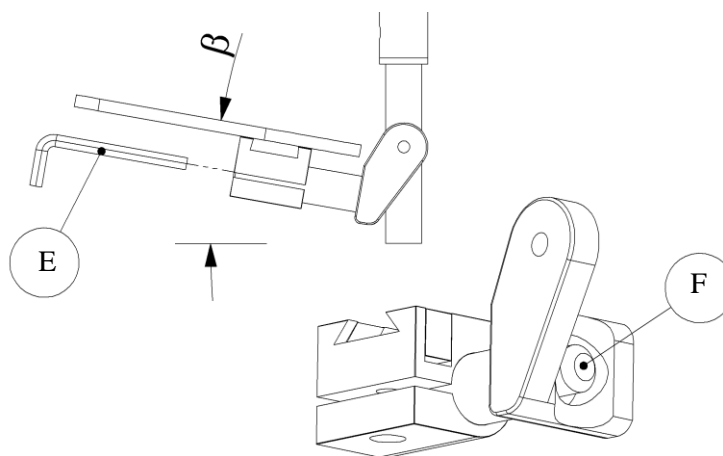


Figure 31 - Ajustement de l'angle

## 11. FREINS

### 11.1 Installer le système de freinage

La position du système de freinage dépend de la dimension des roues arrière. Il est à noter que l'installation du système doit être faite **avant** l'installation des roues, et vice-versa lors du démontage. Consulter la section 5 pour l'installation des roues arrière. La procédure pour l'installation des freins est la suivante :

1. Déterminer la position des freins (Figure 32) :
  - Pour des roues arrière de **12" (31 cm)**, les freins sont installés en **position 1**;
  - Pour des roues arrière de **20", 22" ou 24" (51, 56 ou 61 cm)**, les freins sont installés en **position 2**;
2. Fixer solidement le système de frein à l'aide des vis **A** et d'une « clé hexagonale 6 mm ».

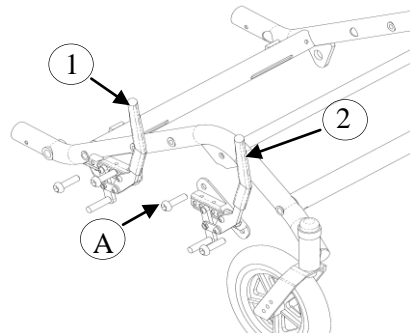


Figure 32 – Emplacement du système de frein

### 11.2 Régler les freins

Pour ajuster la force appliquée sur la roue par le système de freinage, la procédure suivante doit être suivie :

1. Desserrer les vis **B** avec une « clé hexagonale 4 mm » (Figure 33);
2. Selon le cas, avancer ou reculer la barre coulissante de frein;
3. Resserrer les vis **B**;
4. Dans le cas où le frein serait difficile à appliquer, dévisser de nouveau les deux vis et ramener légèrement la barre coulissante vers l'avant de la base;
5. Visser fermement une fois le réglage effectué.

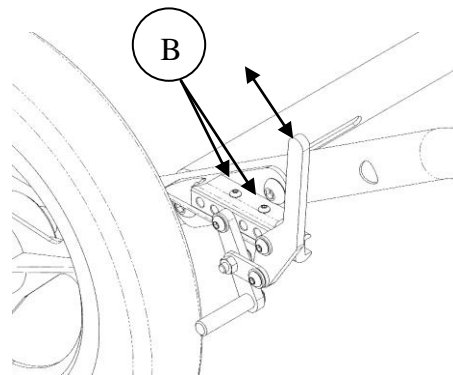


Figure 33 – Réglage du frein

### 11.3 Appliquer les freins

1. Pour **appliquer** les freins, pousser la poignée vers l'avant (figure 34);
2. Pour **libérer** les freins, tirer la poignée vers l'arrière.

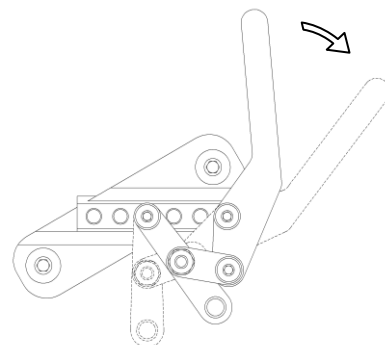


Figure 34 - Appliquer le frein



**Remarque : Prendre soin de resserrer fermement les écrous après chaque réglage. S'assurer de la pression adéquate des pneus avant tout ajustement.**

## 12. ANTI-BASCULANTS

### 12.1 Installer les anti-basculants

Les anti-basculants sont différents selon l'utilisation de roues arrière de 12 po (31 cm), ou de roues arrière de 20, 22 ou 24 po (51, 56 ou 61 cm) tel que montré à la figure 35 et la figure 36. Des ensembles vendus séparément permettent d'assurer une efficacité maximale des anti-basculants lorsqu'il faut passer de roues originales de 12 po (31 cm), à des roues de 20, 22 ou 24 po (51, 56 ou 61 cm), et vice-versa. Pour de plus amples détails, vous êtes invités à communiquer avec nous.



**Il est primordial de vérifier si les anti-basculants, dont est équipée la base  $X \cong ACT$ , correspondent avec ceux qui sont nécessaires pour le diamètre de roues arrière choisi. Les anti-basculants pour des roues arrière de 12" (31 cm) ont besoin d'une rallonge contrairement aux roues arrière de 16", 20", 22" et 24" (40.6, 51, 56 et 61 cm).**

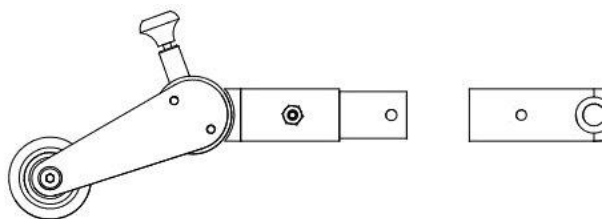


Figure 35 – Pour roues arrière de 12 po

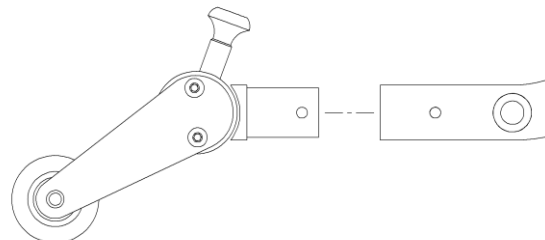


Figure 36 – Pour roues arrière de 16, 20, 22 et 24 po

L'installation des anti-basculants se fait simplement, par la procédure suivante :

1. Insérer l'anti-basculant à l'extrémité du tube latéral de châssis (figure 37);
2. Glisser la vis **A** à travers l'assemblage;
3. Serrer fermement l'écrou **B** avec une « clé à fourche 10mm » tout en maintenant la vis **A** avec une « clé hexagonale 4 mm »;
4. Procéder au réglage de l'anti-basculant. Consulter la section 12.2.

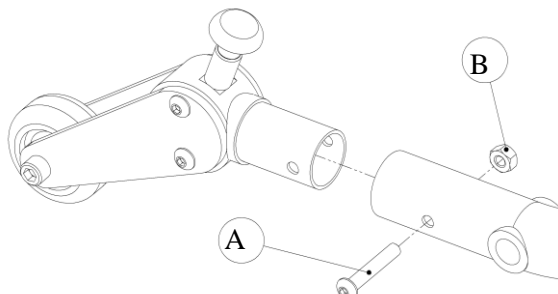


Figure 37 - Installation de l'anti-basculant



**Toute modification apportée à la base  $X \cong ACT$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.**

## 12.2 Ajuster les anti-basculants

Les anti-basculants de la base  $\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}$  sont simples à opérer, mais ils nécessitent une attention particulière. Ils constituent des éléments **essentiels à la sécurité** de l'utilisateur et des personnes mises en contact avec la base.



**Toute modification apportée à la base  $\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}$  doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des usagers et des individus mis en contact avec la base.**

La procédure suivante doit être appliquée pour ajuster les anti-basculants :

1. Vérifier la position nécessaire de l'anti-basculant.  
Consulter le tableau 6;
2. Tirer sur le bouton **C** et le maintenir (figure 38);
3. Placer l'anti-basculant selon la position déterminée auparavant;
4. Relâcher le bouton dans le trou correspondant;
5. Répéter pour chaque côté de la base;
6. **S'assurer que le bouton soit bien mis en place. Vérifier la solidité et l'efficacité du système.**

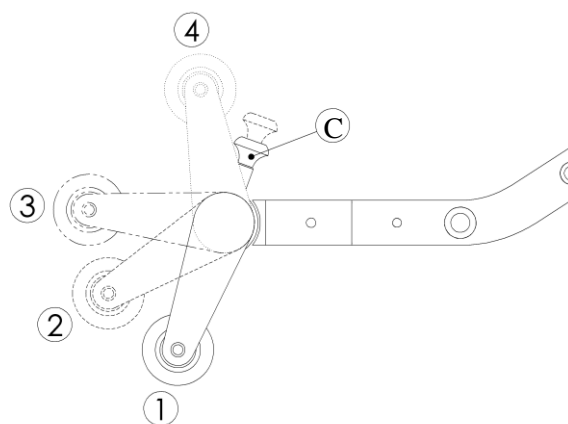


Figure 38 - Possibilités d'ajustement de l'anti-basculant

Tableau 6 - Position suggérée de l'anti-basculant\*

Diamètre des roues arrière (po)	Diamètre des roues avant (po)	Position suggérée de l'anti-basculant*
16" (40,6 cm)	8" (20 cm)	1
20" (51 cm)	6" (15 cm)	3
	8" (20 cm)	1 ou 2
22" (56 cm)	6" (15 cm)	3
	8" (20 cm)	2 ou 3
24" (61 cm)	8" (20 cm)	2
Dégagement de l'anti-basculant		4




\* Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif. Selon l'ensemble des paramètres de la chaise, la position de l'anti-basculant peut varier. Il est impératif de vérifier systématiquement l'efficacité des anti-basculants.

## 13. TRANSPORT

### 13.1 Rabattre le dossier

Afin de faciliter le transport, il est possible de rabattre complètement le dossier de la base. Pour ce faire, suivez les indications suivantes :

1. Enlever toutes les aides à la posture qui puissent gêner l'opération;
2. Soulever les manettes **A** en appuyant sur les cannes;
3. Rabattre le dossier.

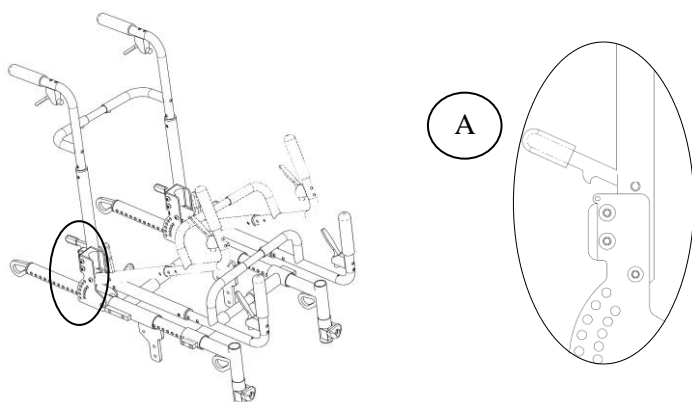

**Mise en garde :**  
S'assurer que le levier est bien ancré dans sa position.

Figure 39 - Rabattre le dossier

### 13.2 Repérer les anneaux d'ancrage

Des anneaux d'ancrage, servant au maintien de la base lors du transport, sont disposés aux positions notées **B** à la figure 40.

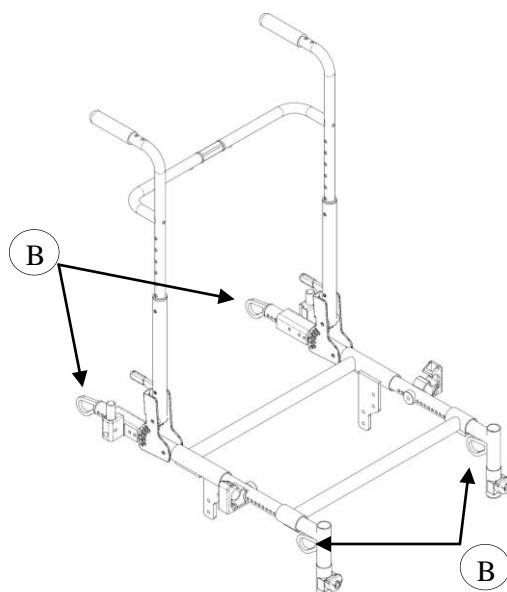


Figure 40 - Position des anneaux d'ancrage



## 14. ACCESSOIRES

Les accessoires de la base  $\mathcal{X} \cong \mathcal{ACT}$  sont fournis sur demande, avec ou sans frais. *Les Équipements Adaptés Physipro inc.* vous rappelle qu'il existe toute une panoplie d'accessoires et d'options permettant de personnaliser chaque base de positionnement en fonction des besoins particuliers de l'utilisateur. Pour tout supplément d'information, vous êtes invités à communiquer avec nous ou consulter le catalogue.

### 14.1 Installer l'extension de poignées de poussée\*

L'extension de poignées de poussée peut être installée de la manière suivante :

1. Retirer le revêtement des poignées droites d'origines (si applicable);
2. Installer le coude A ainsi que les nouvelles poignées à l'aide d'une « clé hexagonale 3 mm » et une « clé à fourche 8 mm »;
3. Pour pivoter les poignées, il suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur chaque côté externe des coudes et d'effectuer la rotation.

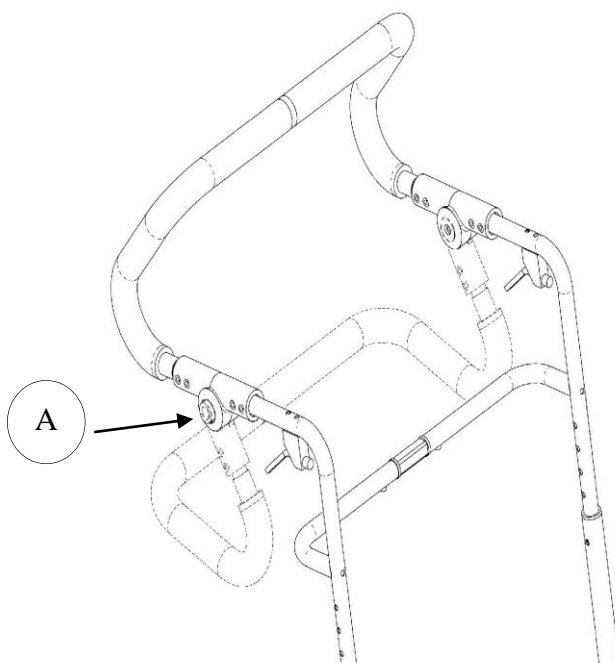


Figure 41 - Installation de l'extension de poignées de poussée

\* Veuillez prendre note que l'extension de poignées de poussée est un exemple de nombreux accessoires « sans frais additionnels » qui vous sont disponibles.

## 15. GUIDE D'ENTRETIEN

L'entretien de la base de positionnement est essentiel. Ainsi, vous maximiserez sa durée de vie et assurerez la sécurité lors de son utilisation. N'oubliez pas de faire inspecter votre base par un professionnel qualifié deux fois par année.

Liste des vérifications	Lors de la réception	Chaque semaine	Chaque mois	Tous les six mois
<b>Roues avant et pneus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la pression des pneus (si applicable);</li> <li>S'assurer que la fourche tourne bien autour de son axe;</li> <li>Vérifier l'usure des pneus;</li> <li>S'assurer la solidité du système de fourche et des écrous.</li> </ul>	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	
<b>Roues arrière et pneus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la pression des pneus (si applicable);</li> <li>S'assurer que les roues ne soient pas déformées de façon excessive;</li> <li>Vérifier l'usure des pneus;</li> <li>S'assurer de la solidité du système de fixation et des écrous;</li> <li>S'assurer que les cerceaux de conduite sont solidement fixés aux roues;</li> <li>Vérifier l'usure des cerceaux de conduite.</li> </ul>	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	
<b>Freins</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'efficacité des freins d'immobilisation;</li> <li>Vérifier que les freins n'interfèrent pas avec le mécanisme des roues.</li> </ul>	✓ ✓		✓ ✓	
<b>Cylindres de bascule et dossier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'efficacité des poignées et des cylindres;</li> <li>Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile.</li> </ul>	✓ ✓		✓	✓
<b>Appuis-bras</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la solidité et l'efficacité des appuis-bras.</li> </ul>	✓			✓
<b>Appuis-pieds</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'usure des palettes des appuis-pieds</li> </ul>				✓
<b>Garnitures</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'usure des garnitures du siège, du dossier et des appuis-bras;</li> <li>S'assurer de la solidité des ceintures de maintien.</li> </ul>				✓ ✓

## **16. GARANTIE**

La base  $X \cong ACT$ , un produit de ***Les équipements adaptés Physipro inc.***, est couverte par une garantie sur pièces et main d'œuvre pour une période de douze (12) mois contre tout défaut de fabrication sur les composantes de base, les composantes optionnels et les pièces neuves remplacées par le fournisseur ou par un établissement autorisé et ce, à compter de la date de livraison ou, le cas échéant, de la date de remplacement.

Cette garantie exclue les pneus, les chambres à air, les garnitures de confort, les appuis-bras, les revêtements de siège, les revêtements de dossiers et les roulements à billes, pour lesquels la période couverte est de trente (30) jours. Le châssis est garanti 3 ans.

***Les équipements adaptés Physipro inc.*** s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant toute la période de garantie. Pour bénéficier du service de garantie, contactez ***Les équipements adaptés Physipro inc.*** ou un établissement autorisé. Ne retournez pas ce produit sans consentement préalable. Dans le cas où le service serait considéré insatisfaisant, faites parvenir vos commentaires à l'adresse inscrite dans ce document, accompagné du nom et de l'adresse du fournisseur, de la date de livraison ainsi que du numéro de série du produit.

### **Exclusions et limitations**

La présente garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou abusés accidentellement ou intentionnellement, qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais entreposage ou dont le numéro de série a été enlevé ou effacé. De plus, cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de ***Les équipements adaptés Physipro inc.*** ou d'un établissement autorisé. Les mêmes restrictions s'appliquent lors d'un endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de ***Les équipements adaptés Physipro inc.*** Enfin, cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ou au non-respect des indications mentionnées dans le présent document.

***Les équipements adaptés Physipro inc.*** se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport.

### ***TRANSPORT ADAPTÉ (Province de Québec, Canada seulement)***

Une personne peut voyager à bord d'un véhicule adapté pour le transport des personnes handicapées tout en demeurant assise dans son fauteuil roulant (de marque  $X \cong ACT$ ), sous réserve de l'utilisation de dispositifs d'immobilisation du fauteuil et de son occupant conformes aux normes et réglementations applicables.

Les Équipements adaptés Physipro inc. ne peut être tenue responsable pour une mauvaise utilisation de dispositifs d'immobilisation ou de dispositifs d'immobilisation non-conformes à la réglementation. Il en est de même pour de modifications du fauteuil non autorisées par Les Équipements adaptés Physipro inc.



***WWW.PHYSIPRO.COM***

Siège Social

370, 10<sup>e</sup> avenue Sud  
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7  
Canada

Tél. : (819) 823-2252 / 1 800 668-2252

Télec. : (819) 565-3337

Courriel : [info@physipro.com](mailto:info@physipro.com)

Succursale Europe

Village des Entrepreneurs  
461, Saint Léonard  
49 000, Angers, France

Tél. : 02-41-69-38-01

Télec. : 02-41-69-43-32

Courriel : [contact@physipro.fr](mailto:contact@physipro.fr)

---